

## معرفی آرسین سلامت ایرانیان

شرکت آرسین سلامت ایرانیان در سال ۱۳۹۰ تأسیس گردید. هدف از تأسیس شرکت آرسین سلامت ایرانیان کمک به توسعه صنعت تجهیزات پزشکی از طریق واردات محصولات با کیفیت بالا، توزیع و فروش محصولات پزشکی و رفع نیاز بیمارستان‌ها به بعضی از محصولات خاص بیمارستانی می‌باشد. این شرکت توانسته است با بهره‌گیری از توان، تجربه و تخصص مدیران و کارکنان شرکت روند رو به رشد خود را آغاز کرده و با تکیه بر مواردی از قبیل واردات محصولات با کیفیت بالا، برنامه‌ریزی دقیق در تأمین کالا در شرایط تحریم، استفاده از نظرات مشتریان، تعهد شرکت به فعالان صنعت تجهیزات پزشکی، خدمات و پشتیبانی فنی- علمی- آموزشی به مشتریان و استمرار در نوآوری و توسعه محصولات جدید در حال تلاش به دستیابی به جایگاه مطمئن در صنعت تجهیزات پزشکی و بیمارستانی می‌باشد. دستیابی به یک جایگاه مطمئن بیش از هر چیز مرهون توجه به جایگاه مشتری در نظر مدیران شرکت و ارتباط مناسب جهت استفاده از نظرات آن‌ها می‌باشد، لذا شرکت تمام توان خود را در جهت جلب حداکثر رضایت مشتریان به کار می‌برد.

# HS

FUTUREMADEPRESENT

## سوزن های نمونه برداری



BIOPSY NEEDLE

کمپانی ایتالیایی H.S. HOSPITAL SERVICE در سال ۱۹۸۰ با هدف ترویج و توزیع روش های جدید فناوری های تشخیصی کم تهاجمی تاسیس گردید و نسل جدیدی از سوزن های نمونه برداری را معرفی نمود. این شرکت دارای مدارک معتبری همچون ایزو 13485، CE اروپا و FDA آمریکا می باشد.

### محصولات کمپانی

#### ● سوزن نمونه برداری بافت نرم

سوزن نمونه برداری اتوماتیک

سوزن نمونه برداری نیمه اتوماتیک

#### ● سوزن نمونه برداری مغز استخوان

### سوزن نمونه برداری

نمونه برداری یا بیوپسی روشی برای برداشتن یک تکه بافت یا نمونه ای از سلول های غیر طبیعی بدن می باشد تا بتوان آن را از نظر خوش خیم و بدخیم بودن در آزمایشگاه مورد بررسی قرار داد. روش های تصویربرداری مانند سی تی اسکن یا ام آر آی برای تشخیص توده ها یا بافت های غیرطبیعی مفید هستند، اما به تنهایی نمی توانند تفاوت بین سلول های سرطانی و سلول های غیرسرطانی را تشخیص دهند. تنها راه تشخیص، انجام نمونه برداری (بیوپسی) از بافت مشکوک می باشد. از وسیله و ابزاری تیز برای برداشتن نمونه و مقدار کمی از بافت محل مورد نظر استفاده می شود که سوزن نمونه برداری یا سوزن بیوپسی نام دارد.



سوزن نمونه برداری اتوماتیک HS NOTA با مدل سوزن TRU-CUT مخصوص بافت نرم می باشد که یک نمونه کاملا استوانه ای را فراهم می نماید. این مدل از سوزن نمونه برداری بعد از شلیک در کسری از ثانیه، میزان مشخصی از بافت را برای نمونه جدا می نماید.


### ویژگی ها:

- طراحی دسته ارگونومیک و سبک، قابلیت بارگذاری آسان با استفاده از یک دست
- دارای نشانگر بارگذاری
- قابلیت بارگذاری با سیستم چرخشی
- نمونه برداری اتوماتیک
- قابلیت ایجاد حداکثر ایمنی به صورت اتوماتیک در هنگام شارژ مجدد
- دارای تکمه شلیک در انتها دسته به منظور فراهم سازی موقعیت بهتر برای کاربر
- عمق نفوذ ۲۵ میلی متر
- دارای نشانگر اکوژنیک برای نمایش در حین گاید

Diameter(G)	Length (mm)	Box
14	100/150/200	10
16	100/150/200/250	10
18	100/150/200/250	10

## سوزن نمونه‌برداری نیمه اتوماتیک

سوزن نمونه برداری نیمه اتوماتیک با کواکسیال برای نمونه‌برداری از انواع بافت نرم (ریه، کلیه، کبد، طحال، پروستات، سینه، غدد لنفاوی و ...) تحت گاید سونوگرافی، سی تی اسکن و غیره دارای کاربرد می‌باشد. این مدل از سوزن بیوپسی کمپانی H.S حدود ۳۰ سال در بازارهای بین‌المللی فروخته شده است.

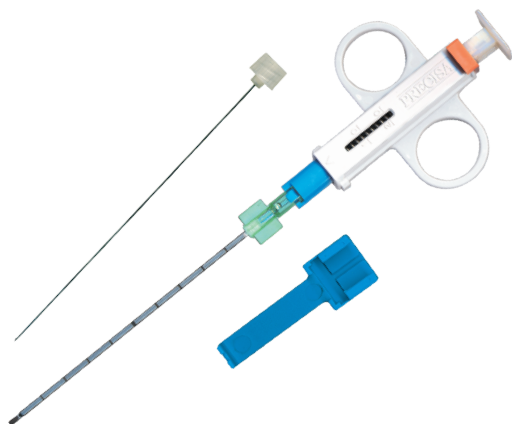

### ویژگی‌ها:

- دارای کانولا جداشونده با نشانگر تعیین عمق، دارای کانکتور لوئر لاک برای نمونه‌برداری‌های چند مرحله ای و تحت گاید
- طراحی دسته ارگونومیک با دو حلقه به منظور سهولت نمونه برداری با یک دست
- قابلیت تنظیم نمونه برداری بین ۱۰ الی ۲۰ میلی متر
- دارای استایلیت با نوک هرمی برای سهولت موقعیت‌یابی تحت گاید
- دارای نشانگر اکوژنیک برای نمایش در حین گاید

Diameter(G)	Length (mm)	Box
13	70/100	10
14	70/100/150/200	10
16	100/150/200	10
18	70/100/150/200/250	10
20	100/150/200	10

سوزن نمونه‌برداری TRU-CUT نمونه سوزن بیوپسی نیمه اتوماتیک مناسب برای بافت نرم می‌باشد.

### ویژگی‌ها:

- کانولا به همراه نشانگر تعیین، تنظیم و توقف عمق ورود
- طراحی دسته ارگونومیک با دو حلقه به منظور سهولت نمونه‌برداری با یک دست
- قابلیت تنظیم نمونه برداری بین ۱۰ الی ۲۰ میلی متر
- دارای نشانگر اکوژنیک برای نمایش در حین گاید
- قابلیت سفارش با و بدون سوزن کواکسیال



Diameter(G)	Length (mm)	Box
14	100/150/200	10
16	100/150/200	10
18	100/150/200	10
20	100/150/200	10



سوزن کواکسیال مناسب برای بافت هایی که به چند بار نمونه گیری از آن بافت نیاز است. ابتدا سوزن کواکسیال وارد می شود پس از ثابت شدن به هر تعداد که مورد نیاز باشد سوزن نمونه برداری وارد می گردد.

#### ویژگی ها:

- سوزن نوک تیز با نشانگر تعیین عمق ورود
- قابلیت جداسازی استایلیت با نوک هرمی و سیستم قفل

Diameter(G)	Length (mm)	Box
14	50/75/100/150	20
16	50/75/100/150	20
18	50/75/100/150/200	20





سوزن آسپراسیون (FNAC) یک سوزن بسیار نازک و توخالی می‌باشد که به یک سرنگ متصل است تا با این روش مقدار کمی از بافت یا مایع از ناحیه مشکوک خارج شود و سپس نمونه به جهت خوش خیم و بدخیم بودن بررسی گردد. ECOJEKT یک سوزن متداول مدل شیب‌م‌باشد که به منظور آسپراسیون و نمونه‌برداری مایعات بافتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### ویژگی‌ها:

- دارای نوک تیز سه وجهی به همراه نشانگر تعیین، تنظیم و توقف عمق ورود
- دارای نشانگر اکوژنیک برای نمایش در حین گاید

**موارد استفاده:** بیوپسی سیستمولوژیک، آسپراسیون FNA، نمونه‌برداری از پرزهای کوریونی، نمونه‌گیری خون جنین و تزریق ماده حاجب و سایر مایعات

Diameter(G)	Length (mm)	Box
17	150/200	20
18	150/200/250/280	20
19	70/100/150/200/300	20
20	50/70/100/150/180/200/300/350	20
21	70/100/150/180/200/300	20
22	50/75/100/150/180/200	20
23	150/180/200	20
25	70/100	20



سوزن نمونه برداری از مغز استخوان به منظور برداشت نمونه از بافت مغز استخوان جهت بررسی های پاتولوژی و موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. سوزن نمونه برداری کمپانی H.S Hospital اولین سوزن بیوپسی مغز استخوان است که از انحراف در حین نمونه برداری جلوگیری می نماید.

### ویژگی ها:

- طراحی دهانه سوزن به صورت مخروطی Fish Mouth جهت سهولت نفوذ به مغز استخوان
- طراحی دسته ارگونومیک به همراه کانکتور لوئر لاک و سبک، قابلیت بارگذاری آسان با استفاده از یک دست
- دارای نشانگر تعیین عمق ورود
- دارای استایلیت با نوک هرمی
- نمونه گیری آسان با سوزن جمشیدی بدون انحراف
- دارای وایر تیز برای خروج نمونه مطابق با اندازه مورد نظر
- دارای غلاف بر روی سوزن برای حداکثر ایمنی

Diameter(G)	Length (mm)	Box
8	100/150	10
11	100/150	10
13	60/100	10

یکی دیگر از سوزن‌های نمونه‌برداری مغز استخوان TRAP IT می‌باشد، این مدل از سوزن بیوپسی قابلیت این را دارد که نمونه را به صورت کامل بدون هرگونه آسیبی خارج نماید.



### ویژگی‌ها:

- سوزن استوانه‌ای با نوک تاجی شکل جهت سهولت نفوذ به مغز استخوان
- طراحی دسته ارگونومیک به همراه کانکتور لوئر لاک و سبک، قابلیت بارگذاری آسان با استفاده از یک دست
- دارای نشانگر تعیین عمق ورود
- طراحی یکپارچه به منظور نمونه‌برداری بدون انحراف
- دارای وایر تیز برای خروج نمونه مطابق با اندازه مورد نظر
- دارای غلاف بر روی سوزن برای حداکثر ایمنی

Diameter(G)	Length (mm)	Box
8	100/150	10
10	100/150	10



## محصولات مصرفی اورولوژی



## UROLOGY PRODUCT

### معرفی کمپانی

کمپانی چینی Jiangxi Yikang Medical Devices Group Co. در سال ۱۹۸۹ به منظور تولید محصولات یکبار مصرف استریل تاسیس گردیده است. این کمپانی دارای مدارک معتبر ایزو 13485، CE اروپا و FDA آمریکا می باشد. محصولات این کمپانی بالغ بر ۳۰ کشور در سرتاسر دنیا به فروش می رسد.

### محصولات کمپانی

- کتتر فولی دو راه
- کتتر فولی سه راه
- کتتر نلاتون

### ویژگی های کتتر فولی

- از جنس لاتکس پوشانده شده با سیلیکون پزشکی
- استریل و یکبار مصرف
- قابل انعطاف
- بدون ایجاد حساسیت

## FOLEY CATHETER

### کتر فولی

یک لوله تو خالی باریک و قابل انعطاف از جنس لاتکس، سیلیکون یا پلی وینیل کلرید (PVC) است که ادرار را از مثانه خارج کرده و به کیسه ادرار (یورین بگ) منتقل می‌کند. از طریق بالونی که بر روی یکی از لوله‌ها تعبیه گردیده است با آب استریل پر شده و ثابت می‌گردد. کتترهای فولی بنا به تشخیص پزشک می‌تواند تا مدت طولانی در داخل بدن بماند.

### موارد استفاده

- در اعمال جراحی با بیهوشی عمومی و پس از جراحی
- بی اختیاری ادرار
- در سالمندان و افراد ناتوان
- پس از جراحی مجاری ادراری و لگن
- بزرگ شدن پروستات و توقف جریان ادرار
- بیماران دچار سنگ کلیه

## TWO - WAY STANDARD TYPE

### کتر فولی دوره

کتر فولی دو راه متداول ترین نوع کتر است که دو لوله و یک بالون در انتها دارد.

Diameter Fr/Ch	Length (mm)	Balloon Capacity (ml)
12-24	390-400	5/10/15/5-15/30/30-50
26-30	390-400	30/30-50




## TWO - WAY PEDIATRIC TYPE

### کنتر فولی دوره کودکان

کنترهای فولی براساس جثه و سن در سایزهای مختلفی در بازار وجود دارد. قطر کنتر فولی مناسب کودکان مابین ۶ تا ۱۰ فرنج می‌باشد.

Diameter Fr/Ch	Length (mm)	Balloon Capacity (ml)
6-10	270-280	3/3-5/5

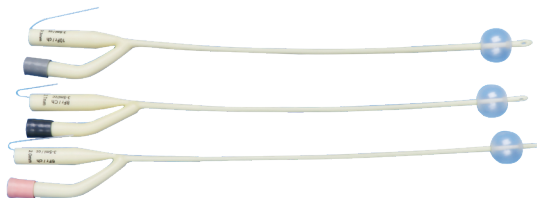


## TWO - WAY FEMALE TYPE

### کنتر فولی دو راه بانوان

کنتر فولی مخصوص بانوان طول کوتاهتری دارد.

Diameter Fr/Ch	Length (mm)	Balloon Capacity (ml)
12-24	250-260	5-10/30

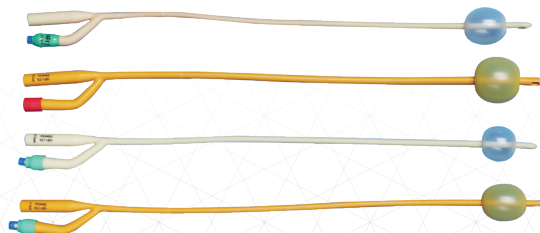

## THREE - WAY STANDARD TYPE

### کتر فولی سه راه

کتر فولی سه راه دارای سه لوله می باشد تا علاوه بر خروج ادرار، در صورت نیاز به شستشو و خروج لخته خون پس از جراحی کمک نماید.

Diameter Fr/Ch	Length (mm)	Balloon Capacity (ml)
16-28	390-400	30/30-50



## NELATON TYPE

### کتر نلاتون

این مدل کتر لوله ای نازک، توخالی و یک بار مصرف می باشد و از آن در جهت جمع آوری ادرار بیمارانی که در دفع ادرار خود با مشکل روبه رو هستند، استفاده می کنند.

کتر نلاتون وسیله ای است که فقط در زمان تخلیه مثانه وارد شده و پس از تخلیه خارج می شود. این کتر، بالون و کیسه تخلیه ادرار ندارد و نسبت به سایر کترها نرم تر و منعطف تر می باشد.

گذاشتن و برداشتن کتر نلاتون کار ساده ای است و شخص پس از آموزش دیدن می تواند خودش این کار را انجام دهد. این مدل تقریباً به همان تعداد که هر فرد به دستشویی نیاز پیدا می کند، یعنی بین ۴ تا ۶ بار در روز مورد استفاده قرار می گیرد.

Diameter Fr/Ch	Color
6-30	Blue/Black/White/Green/Orange/Red



